


Link do produktu: <https://www.ugul.pl/linka-2450-mm-z-dwoma-bloczkami-p-96.html>

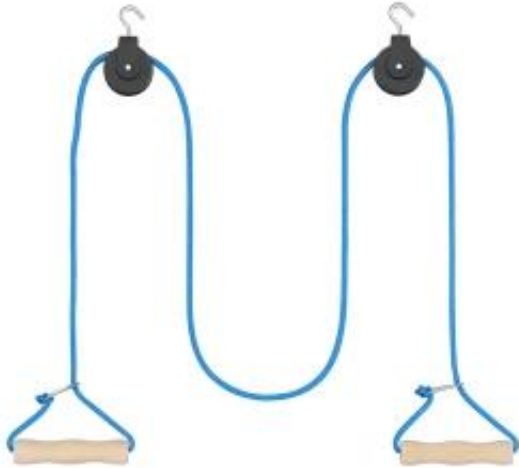

Linka KC-03 2450 mm do ćwiczeń samowspomaganych - 2 bloczki (UGUL/PUR)

Cena brutto	90,00 zł
Cena netto	83,33 zł
Cena poprzednia	109,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-03

Opis produktu

Dlaczego wybrać KC-03 2450 mm z 2 bloczkami?

- Płynne prowadzenie ruchu dzięki 2 bloczkom i regulacji długości.
- Średnica linki 6 mm, uchwyty z tworzywa, rdzeń zwiększający trwałość.
- Lina użyta do produkcji linki: średnica 6 mm, rdzeń wzmacniający, test wytrzymałości 500 daN.

Linka KC-03 2450mm (245cm) z dwoma bloczkami do ćwiczeń samowspomaganych jest podstawowym osprzętem kompleksowego stanowiska rehabilitacyjnego jakim jest - **UGUL**. Linka 2,45m jest pleciona i wykonana z wysokiej jakości materiału. Jej konstrukcja z zastosowaniem dwóch bloczków ułatwia dobranie odpowiedniej siły oporu do określonego przez rehabilitanta ćwiczenia. Duże kółko bloczka przekłada się na mniejszą liczbę obrotów na osi bloczka co wpływa na niski opór samego bloczka do linek oraz wpływa pozytywnie na trwałość tego elementu.

Dostępne długości linki do ćwiczeń samowspomaganych KC/03:

- standardowa 2450mm
- przedłużona do 4000mm (400cm, 4m) - wykorzystywana głównie w warunkach domowych, przy mocowaniu do sufitu itp.

W jakich przypadkach stosuje się linkę do ćwiczeń samowspomaganych?

Linka rehabilitacyjna KC-03 z dwoma bloczkami jest przeznaczona do ćwiczeń samowspomaganych barku i kończyn górnych. Podczas ćwiczenia sprawniejsza ręka pomaga wykonać kontrolowany ruch kończyną o mniejszej sile lub ograniczonej ruchomości. Pozwala to prowadzić ruch w zakresie ustalonym przez fizjoterapeutę.

Linka do ćwiczeń samowspomaganych może zostać wykorzystana między innymi:

- **po operacji piersi** – w tym po mastektomii (operacji usunięcia piersi), operacji oszczędzającej pierś, usunięciu węzłów chłonnych pachowych lub rekonstrukcji piersi, jeżeli lekarz albo fizjoterapeuta zezwolił na rozpoczęcie ćwiczeń barku i kończyny górnej;
- **przy ograniczonej ruchomości barku i ramienia** – gdy celem ćwiczeń jest stopniowe odzyskiwanie zakresu ruchu;
- **po urazach i okresie unieruchomienia kończyny górnej** – na etapie, na którym dozwolone są już ćwiczenia wspomagane;
- **po operacjach ortopedycznych barku** – wyłącznie zgodnie z etapem rehabilitacji wyznaczonym przez lekarza lub fizjoterapeutę;
- **przy osłabieniu jednej kończyny górnej** – kiedy sprawniejsza ręka może wspomagać i kontrolować ruch drugiej ręki.

Linka KC-03 może być używana w kabinie UGUL, przy stanowisku PUR oraz na prawidłowo przygotowanym stanowisku domowym. Zakres ruchu, sposób zamocowania i intensywność ćwiczeń należy dobrać indywidualnie. Po operacji piersi, rekonstrukcji lub zabiegu w obrębie barku nie należy rozpoczynać ćwiczeń bez zgody osoby prowadzącej rehabilitację.

Inne długości i warianty znajdziesz w kategorii [linki do ćwiczeń rehabilitacyjnych](#).

Właściwości higieniczne i zalecenia dezynfekcji

Rączki linki KC-03 wykonane są z **tworzywa technicznego klasy premium**. W warunkach użytkowania w placówkach rehabilitacyjnych materiał ten spełnia podstawowe wymogi higieniczne przy zachowaniu prawidłowej procedury dezynfekcji.

Tworzywo jest materiałem nieporowatym, odpornym na wilgoć i typowe środki dezynfekujące. Nie wchłania wody ani wydzielin skórnych, co ułatwia utrzymanie higieny powierzchni. Materiał zachowuje swoje właściwości w kontakcie z preparatami alkoholowymi i na bazie związków czwartorzędowych, stosowanymi powszechnie w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych.

Zalecane środki i metody dezynfekcji

Do dezynfekcji rączek zaleca się preparaty zarejestrowane jako wyroby medyczne lub biobójcze (kategoria PT2), przeznaczone do powierzchni medycznych. Skuteczne są środki na bazie alkoholu izopropylowego (IPA) lub etanolu w stężeniu 70%, a także preparaty zawierające czwartorzędowe sole amoniowe (QAC). Dobrym wyborem są gotowe chusteczki dezynfekujące do powierzchni medycznych, np. Sani-Cloth, Bacillo Tissues, Meliseptol Foam lub ich odpowiedniki. Dezynfekcję należy przeprowadzać metodą przetarcia powierzchni, zapewniając wymagany czas kontaktu środka zgodnie z instrukcją preparatu (zazwyczaj 1-5 minut).

Wszystkie ćwiczenia należy wykonywać według wskazań rehabilitanta. Rączki linki do ćwiczeń samowspomaganych są odpowiednio wyprofilowane dzięki czemu doskonale pasują do dłoni. Wykonane są z tworzywa.


Linka KC-03 wykonywana jest z liny o średnicy 6 mm z rdzeniem zwiększającym trwałość. Informacja o wytrzymałości do 250 kg oraz test 500 daN odnoszą się do samej liny użytej do produkcji linki, a nie do całego gotowego zestawu po zamontowaniu. Bezpieczeństwo użytkowania zależy również od sposobu mocowania, stanu blozków, punktu zawieszenia oraz wykonywania ćwiczeń zgodnie z zaleceniami rehabilitanta.

Należy zwrócić również uwagę że linka ta posiada dodatkowo regulację długości - co nie jest standardem na rynku podwieszek do ugula.

Średnica linki do ugula wynosi aż 6mm (Ø 6 mm)

Wybierz wariant najlepiej dopasowany do Twoich ćwiczeń: [KC-03 2450 mm – 1 bloczek](#) | [KC-03 4000 mm – 2 bloczki](#) | [KC-04 wydłużona – wersja wielobloczkowa](#).

Uzyskała pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

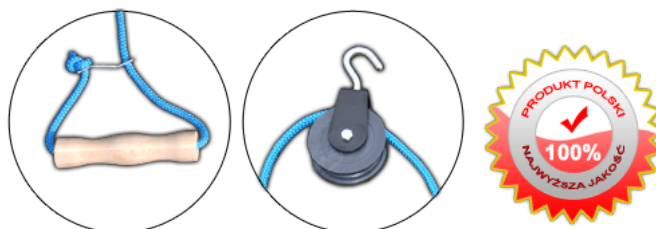

Zamiennie stosowane symbole i nazwy produktu: linka KC-03 2450 mm z 2 bloczkami, KC03, KC-03, KC/03, L2450, L245, linka 245 cm do ćwiczeń samowspomaganych, linka rehabilitacyjna do UGUL/PUR. W ofertach innych sprzedawców podobna linka bywa oznaczana także jako L225 — przed zakupem warto porównać rzeczywistą długość linki, liczbę blozków i sposób regulacji.