

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-do-wyciagu-pod-miednice-zmywalny-covid-19-p-126.html>



Pas do wyciągu pod miednicę KC-13 (skaj) – zmywalny do UGUL/PUR

Cena brutto	132,00 zł
Cena netto	122,22 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-13-skaj

Opis produktu

Pas do wyciągu pod miednicę (KC-13 / KC/13) – zmywalny (skaj) do UGUL/PUR

Pas do wyciągu pod miednicę KC-13-skaj to element osprzętu do ćwiczeń w podwieszeniu, przeznaczony do pracy w systemach [UGUL](#) oraz [PUR](#). Wersja **zmywalna (skaj)** sprawdza się w gabinetach i placówkach, gdzie liczy się szybkie czyszczenie i dezynfekcja po pacjencie.

Uwaga nazewnicza: w praktyce spotyka się też określenie „pas do wyciągu za miednicę” (to ta sama grupa osprzętu KC-13 – sposób użycia zależy od konfiguracji stanowiska ćwiczeń).

Krótko: dlaczego warto

- **Zmywalny skaj** – łatwiejsza higiena i dezynfekcja po każdym użyciu.
- **Stabilne podparcie miednicy** – pas z regulacją dopasowania.
- **Bezpieczne podwieszenie** – paski z zaczepami stalowymi (stal nierdzewna, hartowana).
- **Do UGUL i PUR** – kompatybilny z typowymi stanowiskami do ćwiczeń w podwieszeniu.

Zastosowanie (w praktyce klinicznej)

- ćwiczenia czynne w odciążeniu,
- ćwiczenia czynne z oporem (w zależności od doboru obciążenia i konfiguracji stanowiska),
- praca nad zakresem ruchu, kontrolą ruchu i reedukacją mięśniową – zgodnie z planem fizjoterapeuty.

Konstrukcja i wykonanie

Pas składa się z **pasa miednicznego z regulacją** oraz **dwóch pasków podwieszenia** z zaczepami stalowymi. W rozwiązaniach tego typu kluczowe jest łączenie elementów nośnych: stosowane w produkcji **zgrzewanie trójkątów nośnych** zwiększa wytrzymałość i ogranicza ryzyko przecierania materiału w miejscach styku (ważne przy dynamicznych ruchach podczas ćwiczeń).

Dane techniczne

- **Model / symbol:** KC-13-skaj (spotykane zapisy: KC13, KC-13, KC/13; oznaczenia zamienne: P2, PWM)
- **Materiał:** skaj (wersja zmywalna)
- **Elementy metalowe:** zaczepy stalowe – stal nierdzewna hartowana
- **Wymiary pasa:** 133 × 170 mm


-
- **Przeznaczenie:** osprzęt do kabin UGUL / zestawów PUR

Jak czyścić i dezynfekować (skaj)

- czyścić na mokro łagodnym środkiem myjącym,
- dezynfekuj preparatami zgodnymi z procedurą placówki,
- unikaj agresywnych rozpuszczalników oraz wysokiej temperatury, które mogą uszkodzić powierzchnię skaju.

Dostępne kolory

Granatowy / niebieski

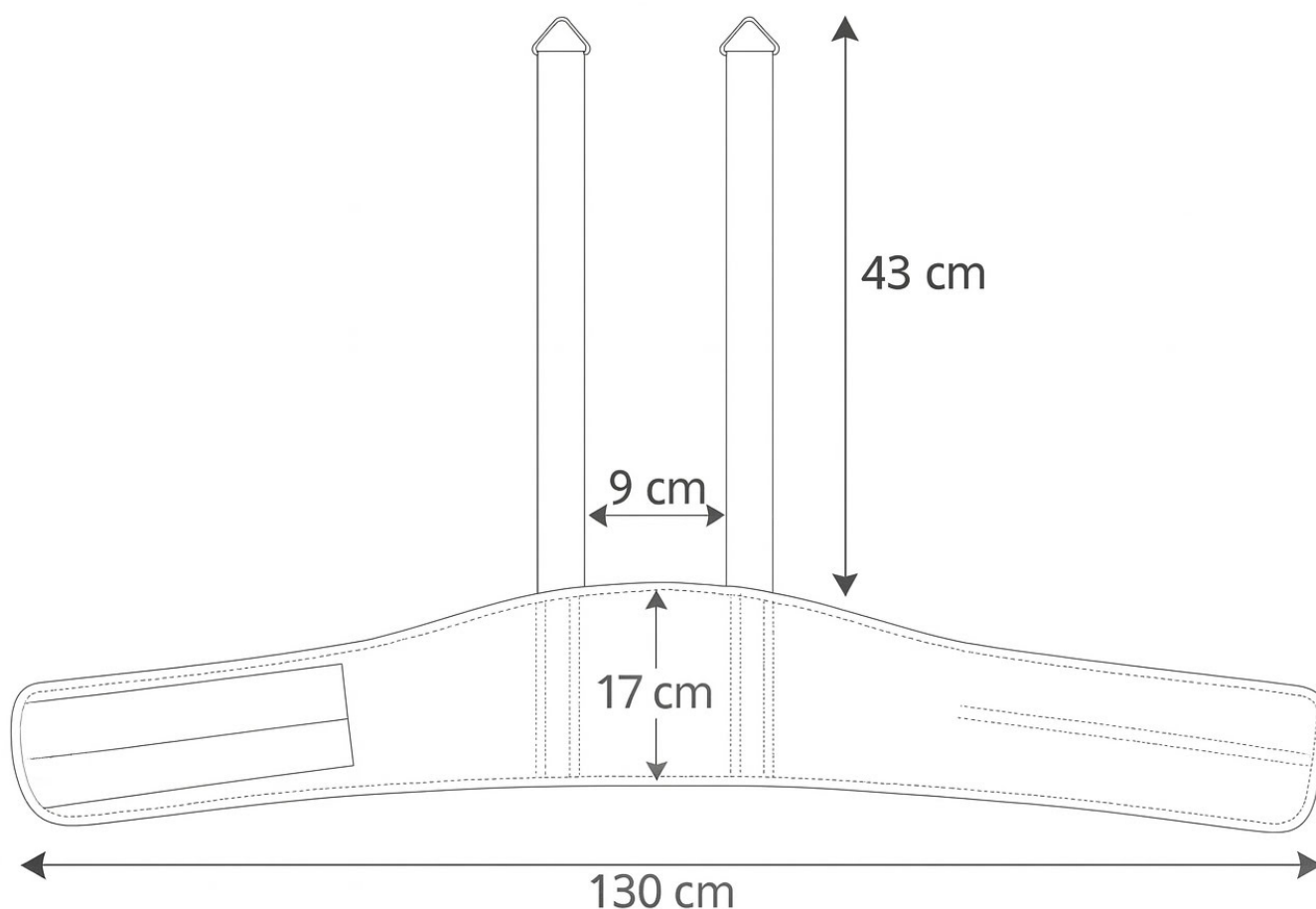

Wymiary pasa KC-13 (skaj) - schemat.

Informacja formalna: Produkt posiada pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (zgodnie z dokumentacją producenta).



Dobierz pasujące elementy (polecane)

- [Podwieszki zmywalne](#) – cała seria higienicznych podwieszek
- [Podwieszki do UGULa](#) – pełna oferta osprzętu do terapii w podwieszeniu
- Wariant klasyczny: [Pas do wyciągu za miednicę \(KC/13\)](#)
- Uzupełnij stanowisko: [linki do ćwiczeń](#) oraz [ciężarki do UGUL](#)
- Pokrewne produkty zmywalne: [podwieszka pod głowę \(zmywalna\)](#), [podwieszka do stabilizacji ud i ramion \(zmywalna\)](#), [duża podwieszka pod miednicę \(zmywalna\)](#)

Zamiennie stosowane symbole: KC13, KC-13, KC/13, P2, PWM, KC-13 skaj, KC/13 zmywalny.