

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pasek-operacyjny-grip-safe-75cm-p-236.html>



Pasek operacyjny GRIP-SAFE 75 cm

Cena brutto	105,00 zł
Cena netto	85,37 zł
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	U-GRIPSAFE75

Opis produktu

Pasek operacyjny GRIP-SAFE 75 cm – stabilizacja kończyn na stole operacyjnym i rehabilitacyjnym

Pasek operacyjny GRIP-SAFE 75 cm to krótki, lekki **pasek operacyjno-zabiegowy na rzepy**, przeznaczony do stabilizacji i unieruchamiania kończyn podczas zabiegów, operacji oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych. Pasuje do większości stołów operacyjnych, zabiegowych i rehabilitacyjnych, stanowiąc praktyczne uzupełnienie systemów [pasów ograniczających ruchy pacjenta](#).

- stabilizacja pojedynczej kończyny (ramię, przedramię, podudzie),
- szybkie zapinanie na rzepy – bez metalowych klamer,
- możliwość wielokrotnego użycia i łatwa dezynfekcja,
- kompatybilny z większością stołów operacyjnych i rehabilitacyjnych.



Elementy mocujące paska operacyjnego GRIP-SAFE 75 cm

Zastosowanie paska GRIP-SAFE 75 cm

Pasek GRIP-SAFE 75 cm jest pomocny wszędzie tam, gdzie konieczne jest pewne, ale kontrolowane **unieruchomienie kończyny** bez użycia skomplikowanych systemów:

- sale operacyjne i zabiegowe – stabilizacja ręki lub nogi w trakcie zabiegu,
- gabinet zabiegowy i pracownia diagnostyczne,
- oddziały szpitalne oraz ośrodki rehabilitacyjne,
- praca z pacjentami niestabilnymi ruchowo lub wymagającymi utrzymania konkretnej pozycji.

Pasek można stosować samodzielnie lub łączyć z innymi [pasami do stabilizacji pacjenta](#), budując kompletny system zabezpieczenia kończyn i tułowia.




Zapięty pasek operacyjny GRIP-SAFE 75 cm – stabilizacja kończyny

Wymiary i parametry techniczne

Krótki pasek GRIP-SAFE 75 cm idealnie nadaje się do stabilizacji pojedynczej kończyny lub wybranego odcinka ciała. Najważniejsze parametry:

- **Długość całkowita:** 75 cm
- **Szerokość taśmy:** ok. 4 cm
- **Powierzchnia mocująca:** 2 odcinki rzepu po ok. 25 cm
- **Sposób zapinania:** rzep – szybkie dopasowanie i regulacja obwodu
- **Przeznaczenie:** stabilizacja i unieruchomienie kończyn podczas zabiegów, operacji i rehabilitacji

W przypadku potrzeby unieruchomienia większego obwodu można zastosować dłuższe pasy lub połączyć kilka pasków GRIP-SAFE. Do stabilizacji tułowia na stole zabiegowym polecany jest [skórzany pas operacyjny do unieruchamiania pacjenta](#), a do mniejszych obwodów [pasek operacyjny GRIP-SAFE 60 cm](#).

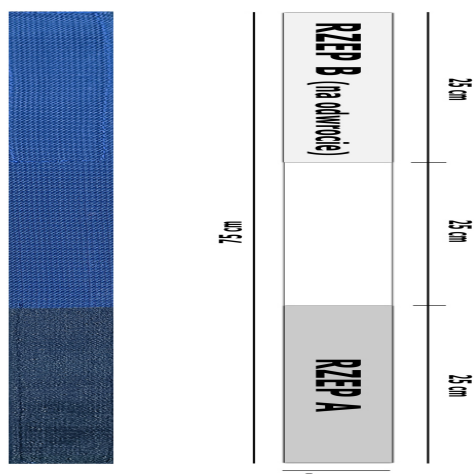

operacyjnego GRIP-SAFE 75 cm

Schemat wymiarów paska

Bezpieczeństwo użytkowania paska operacyjnego

Pasek operacyjny GRIP-SAFE 75 cm powinien być stosowany przez przeszkolony personel medyczny zgodnie z procedurami przyjętymi w placówce. Po zapięciu paska należy skontrolować:

- czy kończyna jest stabilna, ale nie dochodzi do nadmiernego ucisku,

-
- czy nie ma objawów zaburzenia krążenia obwodowo (ból, drętwienie, zasinienie),
 - czy pasek nie uciska drenów, przewodów, cewników ani elementów aparatury,
 - czy rzepy są dobrze docisnięte i nie ma ryzyka ich samoistnego rozpięcia.

Pasek operacyjny nie zastępuje systemów pasów bezpieczeństwa przeznaczonych do transportu pacjentów w pojazdach medycznych – należy go stosować wyłącznie w warunkach stacjonarnych (stół, leżanka, fotel).